



Disinfectant and drying agent bags

For Care of Comprehenso AmoVes 200 Phantom Systems

To be opened **after use** of the phantom system

Keep out of reach of children | Follow the instructions for use

Desinfektionsmittel und Trocknungsmittelbeutel

Zur Aufbereitung von Comprehenso AmoVes Phantomsystemen

Erst **nach der Verwendung** des Phantomsystems öffnen

Von Kindern fernhalten | Gebrauchsanweisung beachten



Content

This Clean & Dry Set was developed for use with **Comprehenso AmoVes 200 phantom systems**. It contains **one disinfectant tablet** for the preparation of a disinfection solution as well as **two drying agent bags** for transporting and storing the phantom system.

Disinfectant Tablet

One Tablet (1g) contains 500mg Troclosesene Sodium / Sodium dichloroisocyanurate (CAS 2893-78-9)

Instructions: Use a glass or plastic container to prepare the disinfectant solution for phantom system disinfection. Dissolve one sterilizing tablet in 2.5 liters cold or hand warm tap water. Perform the disinfection procedure according to the phantom system manual. Contact time of the disinfectant solution: 15 minutes. Bactericidal according to EN 1276; Fungicide according to EN 1650. The disinfectant solution can be disposed of via wastewater after use.

Warning: May cause serious eye irritation or damage; may cause severe skin burns, may intensify fire (oxidiser); may cause respiratory irritation; Very toxic to aquatic life with long lasting effects; Do not use together with other products: May release dangerous gases (Chlorine); Contact with acids liberates toxic gas.

Precaution: Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. Not to be taken. Avoid contact with eyes. Use only in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Do not use a metallic container to prepare the solution and do not place metallic objects in the solution. If medical advice is needed, have this information at hand. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, if eye irritation persists, get medical advice. Take care not to splash fabrics as the solution may bleach fabrics. Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.

Produced by: Laboratoires Polivé, 105 rue Anatole France, 92300 Levallois, France

Drying Agent bags

One Drying Agent bag contains 4g Silica Gel

Instructions: To take up any remaining liquid residue in the phantom, one or two unused drying agent bags are placed in the case during transportation and storage. Dispose of with residual waste after use.

Precaution: Do not eat. Keep away from children.

Produced by: Tropack Packmittel GmbH, Vor dem Polstück 8, 35633 Lahnau



Inhalt

Dieses Clean&Dry Set wurde zur Verwendung mit **Comprehenso AmoVes 200 Phantomsystemen** entwickelt. Es enthält **eine Desinfektionstablette** zur Herstellung einer Desinfektionslösung sowie **zwei Trocknungsmittelbeutel** für den Transport und die Lagerung des Phantomsystems.

Desinfektionstablette

Eine Tablette (1g) enthält 500mg Natriumtrolosen/
Natriumdichlorisocyanurat (CAS 2893-78-9)



Anwendung: Verwenden Sie einen Glas- oder Kunststoffbehälter, um die Desinfektionslösung für die Desinfektion des Phantomsystems herzustellen. Lösen Sie eine Sterilisationstablette in 2,5 Liter kaltem oder handwarmem Leitungswasser auf. Führen Sie das Desinfektionsverfahren gemäß dem Handbuch des Phantomsystems durch. Einwirkzeit: 15 Minuten. Bakterizid nach EN 1276; Fungizid nach EN 1650. Desinfektionslösung nach Verwendung über das Abwasser entsorgen.

Warnung: Kann schwere Augenreizungen oder -schäden verursachen; kann schwere Hautverbrennungen verursachen; wirkt brandbeschleunigend (Oxidationsmittel); kann Atemwegsreizungen verursachen. Sehr giftig für Wasserlebewesen mit langanhaltender Wirkung; nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden: Kann gefährliche Gase (Chlor) freisetzen; Kontakt mit Säuren setzt giftige Gase (Chlor) frei.

Vorsichtsmaßnahmen: An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht einnehmen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verwenden Sie zur Herstellung der Lösung keinen Metallbehälter und legen Sie keine Metallgegenstände in die Lösung. Wenn medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie diese Informationen bereit. Wenn in den Augen: Vorsichtig einige Minuten mit Wasser spülen. Entfernen Sie falls vorhanden Kontaktlinsen. Spülen Sie, wenn die Augenreizung weiterhin besteht weiter und lassen Sie sich ärztlich beraten. Achten Sie darauf, die Lösung nicht zu verspritzen, da diese Stoffe bleichen kann. Ungelöste Tabletten gemäß lokal geltenden Vorschriften entsorgen.

Hersteller: Laboratoires Polivé, 105 rue Anatole France, 92300 Levallois, France


Trocknungsmittelbeutel

Ein Trocknungsmittelbeutel enthält 4g Silica Gel

Anwendung: Um verbliebene Flüssigkeitsrückstände nach der Aufbereitung und dem Abbau aus dem Phantom aufzunehmen, wird zum Transport und bei Lagerung im Koffer ein unbenutzter Trocknungsmittelbeutel in den Koffer eingelegt. Nach Verwendung im Restmüll entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen: Nicht essen. Von Kindern fernhalten.

Hersteller: Tropic Packmittel GmbH, Vor dem Polstück 8, 35633 Lahnau

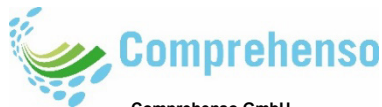

Comprehenso GmbH
Sophie-Küppers-Str. 50 | 30559 Hannover
Info@comprehenso.de

www.comprehenso.de

